


PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH TYP IS

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych przeznaczony jest do prowadzenia wlewów metodą grawitacyjną z pojemników szklanych, twardych tworzywowych i miękkich worków - uniwersalny

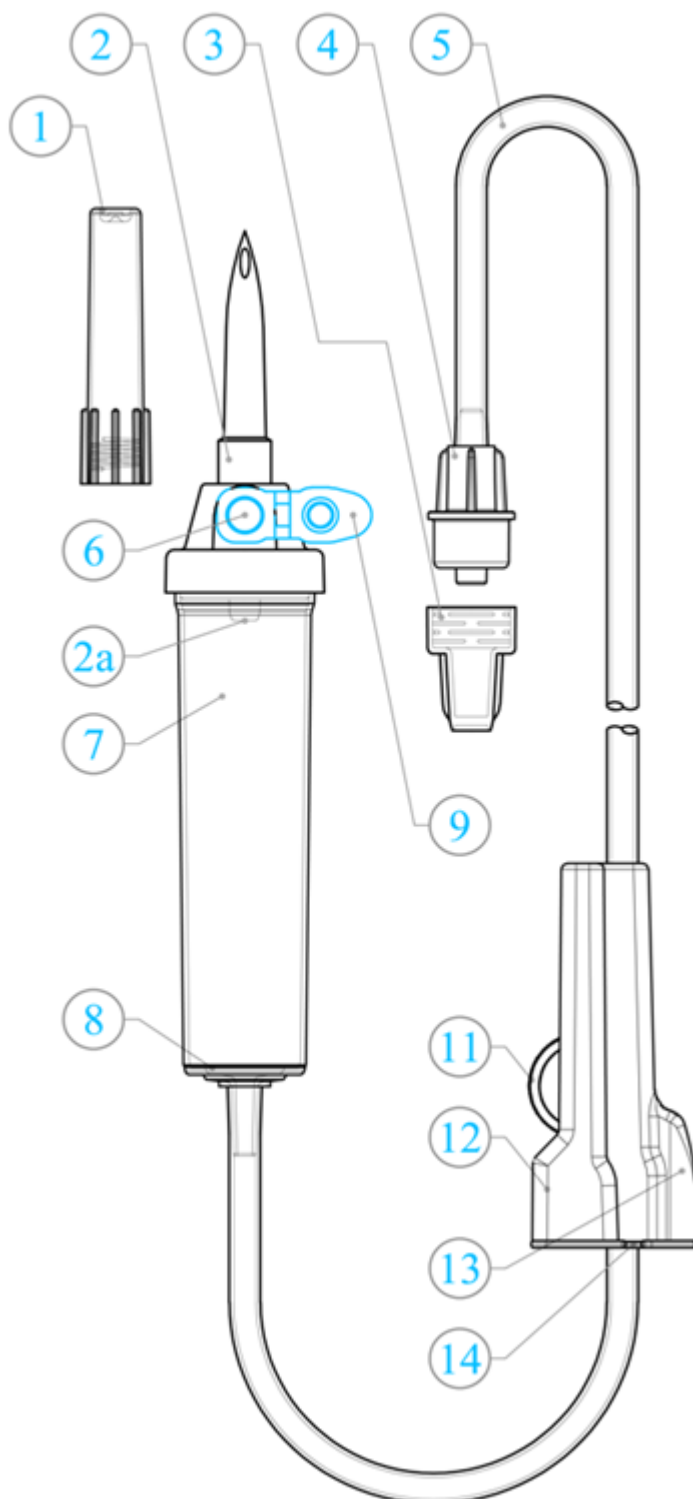

Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych są wyrobami jednorazowego użytku, jałowymi, niepirogennymi, nietoksycznymi, pozbawionymi lateksu, podlegającymi sterylizacji tlenkiem etylenu. Wolne od ftalanów.

Produkowane są w warunkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnym z normami PN-EN ISO 13485:2016-04, PN-EN ISO 9001:2015 oraz dyrektywy medycznej 93/42/EEC, zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W skład aparatów do wlewów wchodzi następujące elementy:

- (1) osłodka igły biorczej z podłużnymi żebrami ułatwiającymi zdejmowanie,
- (2) igła biorcza dwukanałowa uniemożliwiająca wypadanie przyrządów z butelek i wypływ płynu z miejsca połączenia, łatwe wprowadzenie nawet do małych pojemników miękkich,
- (2a) kroplomierz 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml,
- (3) osłodka łącznika luer-lock,
- (4) łącznik stożkowy luer-lock,
- (5) dren medyczny o długości 150 cm wykonany z PVC niezawierającego ftalanów,
- (6) hydrofobowy filtr powietrza,
- (7) komora kroplowa (min. 6cm), wykonana z elastycznego tworzywa przezroczysta; umożliwia łatwe ustalenie poziomu płynu; elastyczne tworzywo daje komfort podłączenia przyrządu; wolna od PVC.
- (8) filtr płynu o wielkości oczek 15 µm,
- (9) zatyczka filtra hydrofobowego typu on/off w kolorze niebieskim,
- (11) rolka zaciskacza daje możliwość precyzyjnego dozowania lub zatrzymania podawania płynu,
- (12) zaciskacz rolkowy z logo producenta, regulacja min. 15 mm,
- (13) miejsce na igłę biorczą po użyciu,
- (14) zaczep na dren.

Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych są:

- pakowane w opakowanie jednostkowe typu blister-pack
- pakowane po 200 szt. w opakowanie zbiorcze, karton z tektury fali
- na opakowaniu widoczna data ważności

Numery katalogowe:

001 401 - długość 150cm, wolny od ftalanów z miejscem na igłę w postaci osłodka



MARGOMED sp. z o.o.
ul. E. Plewińskiego 16, 20-270 Lublin Poland tel. +4881 743 96 33
www.margomed.com e-mail: biuro@margomed.com