

BEZPIECZNA LINIA NACZYNIOWA

EXADROP® - POSIADA PRECYZYJNY REGULATOR PRZEPŁYWU DO KONTROLOWANEJ INFUZJI
W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM



Zastosowanie wyrobu: zestaw do dożylnego podawania leków z urządzeniem do kontroli przepływu.



Filtr odpowietrzania w odpowietrzniku aparatu tworzy system zamknięty w rozumieniu definicji NIOSH, co jest potwierdzone badaniami. Filtr powietrza w odpowietrzniku posiada wydajność filtra bakteryjnego (BFE), wynoszącą min. 99,9999941% oraz wydajność filtra wirusowego (VFE), wynoszącą min. 99,99964%. Procedura badawcza BFE zgodna ze specyfikacją 36594C, ASTM F2101 oraz ASTM 2100. Laboratorium badawcze akredytowane zgodnie z ISO EC 17025.



Nazwa firmy na komorze kroplowej umożliwiającą identyfikację producenta w przypadku incydentu medycznego i reklamacji.




Dwuczęściowa komora kroplowa o zróżnicowanej, segmentowanej funkcjonalności optycznej (wysoka przezroczystość w segmencie górnym) i manualnej (elastyczność w segmencie dolnym).



Dren zaopatrzony w zawór zwrotny BCV przeciwdziałający cofaniu się krwi do aparatu (nr 4180330).



Dren zaopatrzony w zawór bezigłowy do podania leku. Dezynfekcja zaworu metodą przecierania (zgodnie z zaleceniami PSPE zeszyt VIII).

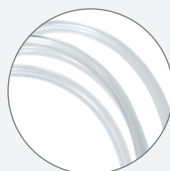


Dren bez PCV.

BEZPIECZNA LINIA NACZYNIOWA

EXADROP® - APARAT DO KONTROLOWANEJ INFUZJI W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM

Exadrop® pozwala:

- osiągnąć stały poziom przepływu
- uregulować kinetykę podaży leku
- podać wymaganą ilość leku w konkretnym czasie

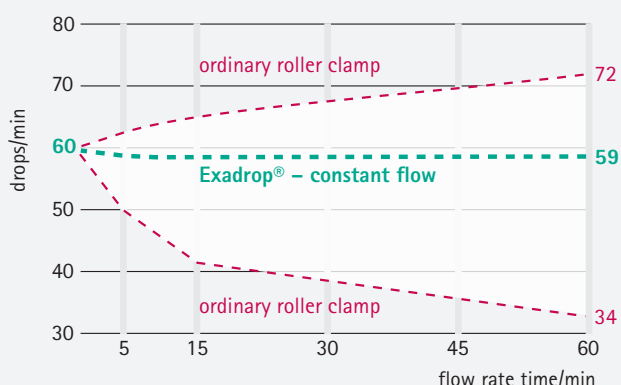

Ważna informacja:

Nie należy podawać krwi, preparatów osocza oraz płynów o wysokiej lepkości poprzez regulator przepływu Exadrop®!

Exadrop®

Filtr odpowietrzania stosowany w aparacie Exadrop może być określony jako system zamknięty w odniesieniu do definicji NIOSH 2004.

Nazwa produktu	Odpowietrznik	Wolne od PVC	Zawór BCV	Port iniekcyjny	Długość drenu (cm)	Numer
Exadrop® z Intrafix® Primeline	■				150	406 1209
Exadrop® z Intrafix® Primeline	■			■	150	406 1276
Exadrop® z Intrafix® Primeline	■				180	406 1284
Exadrop® z Intrafix® Primeline	■				210	406 1225
Exadrop® z Intrafix® Primeline Neutrapur®	■	■			150	406 2264
Exadrop® Inline					54	406 1306
Exadrop® z Intrafix® Primeline i Infuvalve® B.C.V.*	■		■		180	418 0330

Ilość w opakowaniu.: 50 szt.

AESULAP CHIFA Sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl,
tel. (61) 44 20 100 | fax (61) 44 23 936 | www.chifa.com.pl

AESULAP CHIFA - firma grupy B. Braun

HC-BLN-043