



Miękki, chłonny opatrunek z pianki poliuretanowej z warstwą kontaktową Safetac®, przeznaczony do zaopatrywania powierzchownych ran z wysiękiem małym do średniego.

- Minimalizuje ból i zapewnia atraumatyczną zmianę opatrunku
- Delikatnie przywiera do skóry, nie przywiera do rany i zapewnia wysoki komfort użytkowania
- Może być docinany do dowolnego rozmiaru i kształtu

Warstwa Safetac®

- Minimalizuje ból i urazy przed, podczas i po zmianie opatrunku
- Nie przywiera do łóżyska rany
- Przywiera wyłącznie do suchej skóry
- Uszczelnia brzegi rany i zmniejsza ryzyko maceracji skóry

Pianka poliuretanowa:

- pochłania wysięk z rany
- może być stosowany pod kompresjoterapią
- dobrze dopasowuje się do rany i skóry otaczającej

Folia poliuretanowa:

- Oddychająca
- Wodoodporna




Technologia Safetac®


Technologia Safetac®. Mniej urazów. Mniej bólu.

Opatrunki w technologii Safetac® zapewniają atraumatyczną zmianę opatrunku. Minimalizują urazy rany i skóry otaczającej. Minimalizują ból odczuwany przez pacjenta. Zmniejszają ryzyko maceracji skóry wokół rany.

Aby uzyskać więcej informacji wejdź na stronę www.molnlycke.pl

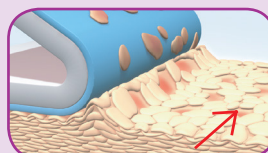


Opatrunek z tradycyjną warstwą przyklepną powoduje bolesne odrywanie komórek skóry.

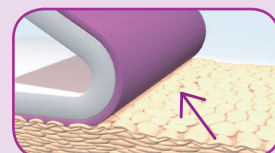

Technologia Safetac® nie powoduje uszkodzeń dna rany i skóry otaczającej.


Jak prawidłowo stosować Mepilex® ?

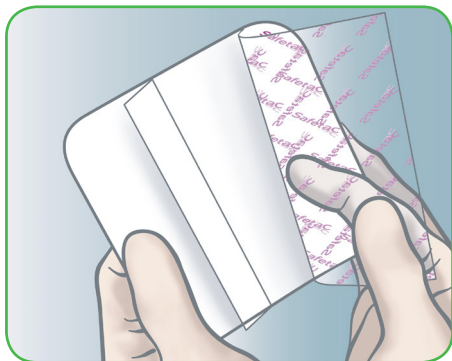

Oczyszczyć powierzchnię rany i skórę otaczającą. Dokładnie osuszyć skórę. Zdjąć folię zabezpieczającą.



Założyć opatrunek na ranę. Opatrunek powinien zachodzić ok. 2 cm na skórę otaczającą.

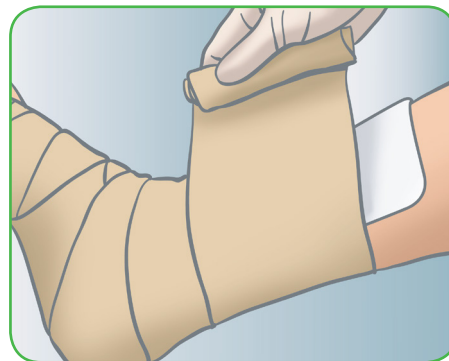

Jeżeli to konieczne można dodatkowo umocować za pomocą bandaża, rękawa mocującego lub taśmy mocującej Mepitac®.

Jak działa Mepilex®?

Mepilex® pochłania nadmiar wysięku, wspomaga oczyszczanie rany i utrzymuje wilgotne środowisko w dnie rany. Dzięki silikonowej warstwie kontaktowej Safetac® opatrunek nie przywiera do rany, natomiast idealnie dopasowuje się do skóry otaczającej, uszczelnia brzegi rany, zabezpiecza przed wyciekaniem wysięku i ogranicza ryzyko maceracji skóry.

Opatrunek Mepilex® może być stosowany z kompresjoterapią.

Korzyści wynikające ze stosowania Mepilex®?

- Minimalizuje ból i urazy związane ze zmianą opatrunku
- Ogranicza ryzyko maceracji skóry wokół rany
- Idealnie dopasowuje się do kształtu rany
- Może być stosowany w połączeniu z kompresjoterapią
- Może być docinany do dowolnego kształtu i rozmiaru
- Idealnie dopasowuje się w miejscach trudnych do zaopatrzenia
- Zapewnia wysoki komfort użytkowania
- Może być utrzymywany na ranie max. do 7 dni
- zmiana opatrunku w zależności od stanu rany

Zastosowanie

Przeznaczony do ran powierzchniowych ostrych i przewlekłych z małym i średnim wysiękiem, bez cech infekcji, we wszystkich fazach gojenia, o różnej etiologii tj: owrzodzenia gołeni, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe, owrzodzenia nowotworowe oparzenia niepełnej grubości skóry, rany pourazowe, rany w przebiegu radioterapii. Opatrunek może być także stosowany jako opatrunek wtórny.



Numer katalogowy	Wielkość opatrunku w cm	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
294015	5 x 5	5
294100	10 x 10	5
294150	10 x 12	5
294200	10 x 20	5
294201	10 x 21	5
294250	12 x 20	5
294000	12,5x12,5	5
294300	15 x 15	5
294310	17,5x17,5	5
294400	20 x 20	5
294500	20 x 50	2
294410	21 x 22	5

Dowiedz się więcej www.molnlycke.pl

Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

Biuro Handlowe: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Obsługa Klienta: 22 350 52 80 {

Znaki firmowe, nazwy i logo Mölnlycke Health Care oraz ProcedurePak® są zarejestrowane globalnie w ramach grupy Mölnlycke Health Care Group of Companies. © 2016. Mölnlycke Health Care AB. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Mölnlycke®